



VITAL'ACT-3S BLEU

Mise à jour du lecteur



PREREQUIS

Cette procédure permet de mettre à jour le lecteur de carte vitale et de bénéficier des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-Vitale Addendum7.

Avant de démarrer la mise à jour, veillez à

- 1/ fermer toutes vos applications et logiciels santé
- 2/ vous munir de la clé USB contenant le fichier de mise à jour
- 3/ vous munir de la carte de déblocage



Vous pouvez dès à présent suivre la procédure de mise à jour de votre lecteur VITAL ACT 3S_bleu.




SUR L'ORDINATEUR



- 1 Insérer la clé USB sur votre PC
- 2 Sur PC, copiez/collez le fichier "Mise à jour Addendum 7 INGENICO.exe" sur votre "bureau" en faisant un clic droit sur le fichier


- 2 Branchez le lecteur et déchargez-le dans votre logiciel de facturation SESAM-Vitale
- 3 Fermez ensuite votre logiciel de facturation

- 4 Ouvrez le logiciel de mise à jour que vous avez placé sur le "bureau"
- 5 La fenêtre détecte automatiquement l'emplacement du lecteur. Cliquez sur "Démarrer"

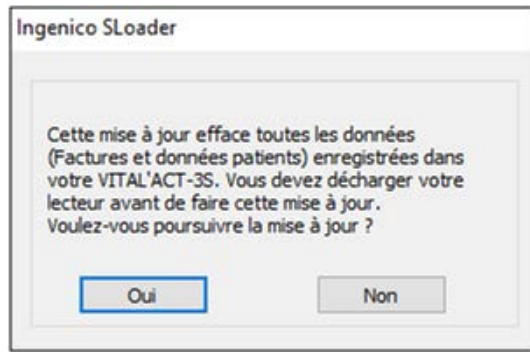

6 Une fenêtre s'ouvre sur votre ordinateur. Cliquez sur "Oui" afin de poursuivre la mise à jour.

ATTENTION : avez-vous bien pensé à décharger votre lecteur ? (cf étape 1)

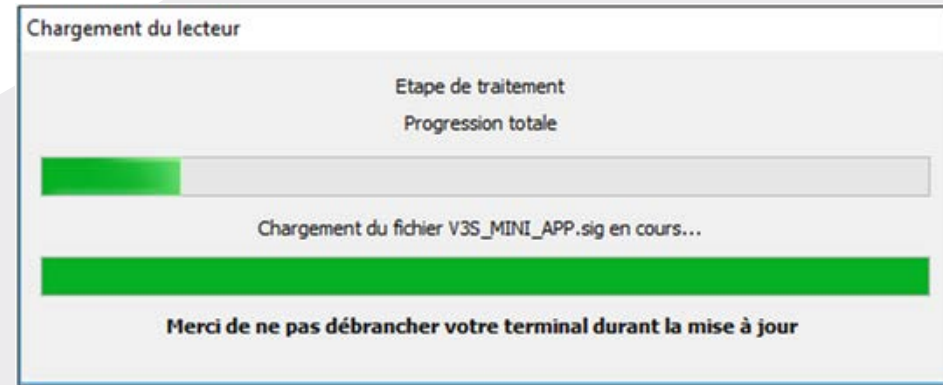


8 Une fenêtre de chargement s'ouvre.
ATTENTION : ne déconnectez pas le lecteur durant cette installation !

9 Le lecteur va ensuite vous demander d'introduire la carte de déblocage : "Terminal verrouillé : Insérez la carte de déverrouillage dans le coupleur vitale".
Introduisez votre carte dans la fente prévue.



10 Le lecteur affiche "Application activée". Cliquez sur le bouton "Valider" du lecteur et retirez la carte.

11 Vous pouvez fermer le logiciel de mise à jour.

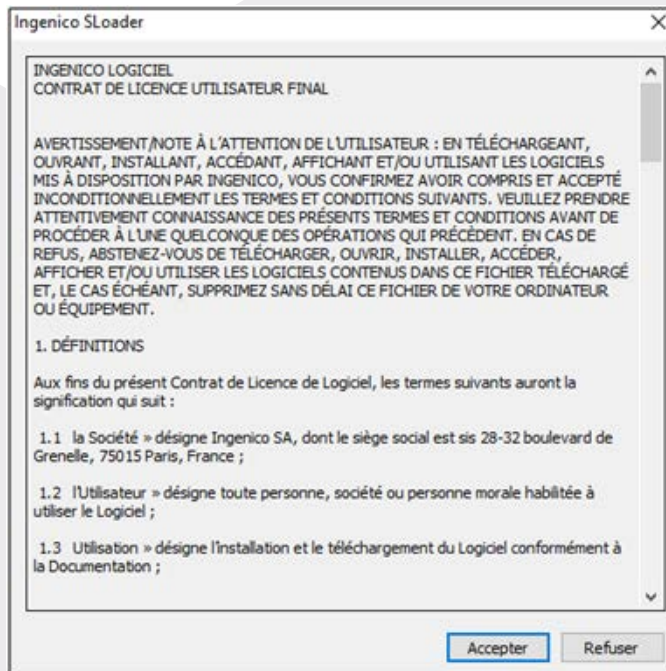

7 Cliquez sur "Accepter" pour lancer la mise à jour.



La mise à jour est terminée

Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :
support@topaze.com

