



VITAL'ACT-3S BLEU

Mise à jour du lecteur
MAC



PREREQUIS

Cette procédure permet de mettre à jour le lecteur de carte vitale et de bénéficier des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-Vitale Addendum7.

Avant de démarrer la mise à jour, veuillez à

- 1/ fermer toutes vos applications et logiciels santé
- 2/ vous munir de la clé USB contenant le fichier de mise à jour
- 3/ vous munir de la carte de déblocage



Vous pouvez dès à présent suivre la procédure de mise à jour de votre lecteur VITAL ACT 3S_bleu.






1 Insérer la clé USB sur votre MAC

2 Ouvrir la clé USB nommée INGE_ADD7 se trouvant dans votre FINDER et double cliquer sur le fichier nommé "ETAPE 1"

3 Le logo d'INGENICO apparaît, glisser l'image dans le menu APPLICATION se trouvant à gauche du Finder.

4 Branchez le lecteur et déchargez-le dans votre logiciel de facturation SESAM-VITALE

5 Fermez ensuite votre logiciel de facturation. Ouvrez le logiciel de mise à jour que vous avez téléchargé.

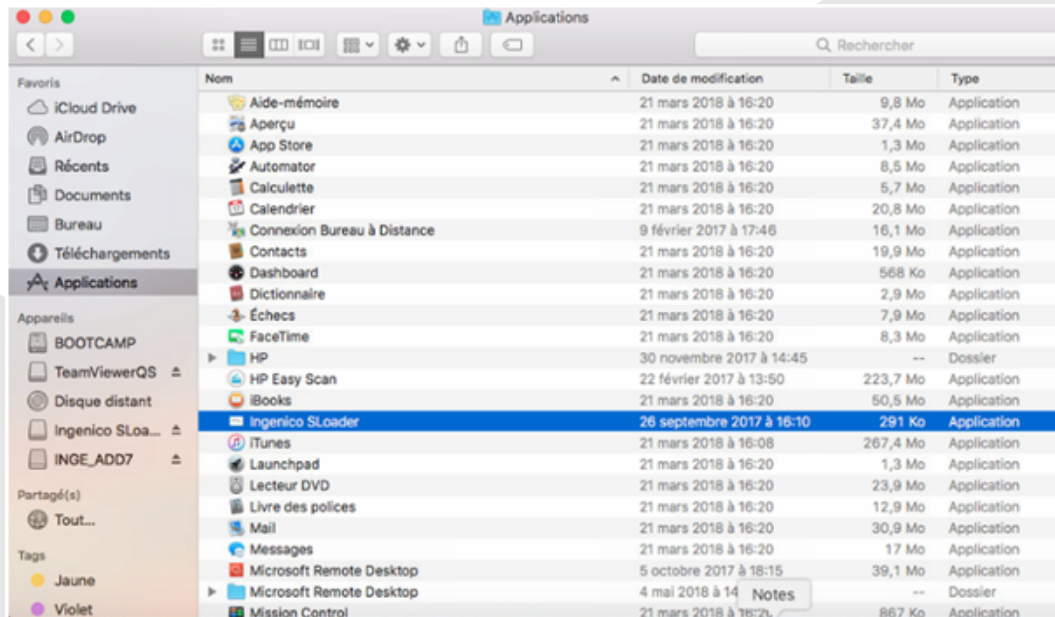

6 Ouvrir le menu APPLICATION et double cliquer sur le logiciel nommé "Ingenico Sloader"



7 Cliquer sur DEMARRER et laisser la mise à jour se terminer


8 Cliquer sur OK au message de fin d'opération et fermer les fenêtres Sloader et celle du logo INGENICO.



9 Ouvrir la clé USB à gauche du Finder portant le nom INGE_ADD7 pour ouvrir le fichier nommé « ETAPE 2 » pour faire apparaître le logo INGENICO



10 Glisser l'image d'INGENICO dans le menu APPLICATION se trouvant à gauche du Finder.

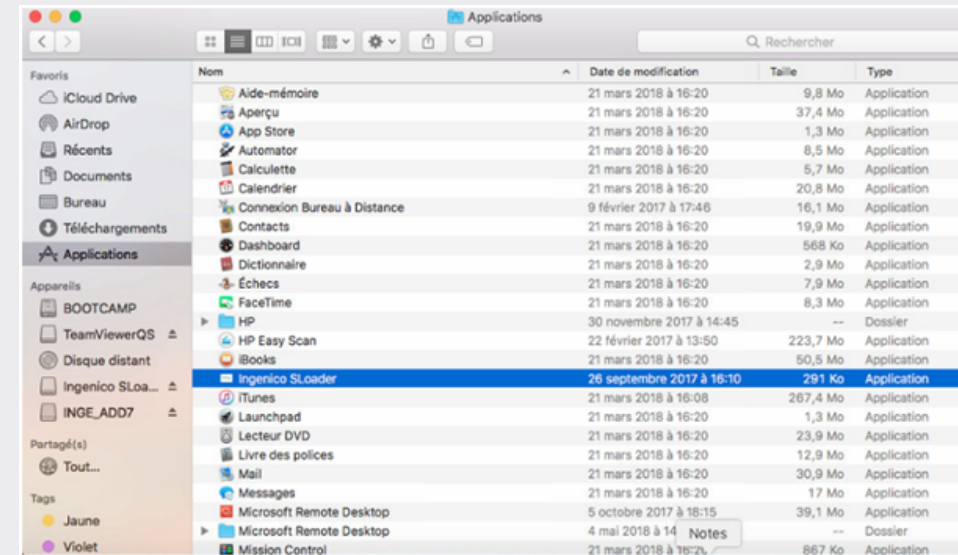

11 Ouvrir le menu APPLICATION et double cliquer sur le logiciel nommé Ingenico SLoader:



12 Cliquer sur DEMARRER et laisser la mise à jour se terminer

13 Cliquer sur OK au message de fin d'opération et fermer les fenêtres Sloader et celle du logo INGENICO.

14 Le lecteur va ensuite vous demander d'introduire la carte de déblocage : "Terminal verrouillé : Insérez la carte de déverrouillage dans le coupleur vitale". Introduisez votre carte dans la fente prévue.



15 Le lecteur affiche "Application activée". Cliquez sur le bouton "Valider" du lecteur et retirez la carte.

16 Vous pouvez fermer le logiciel de mise à jour.



La mise à jour est terminée

Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :
support@topaze.com

